


Oversigtskort til brugeren for Lår plus/Lår alene

L300 **Go** 

Påsætning af L300 Go-lårmanchetten

- 1 Fugt tekstilelektroderne til låret, og sæt dem fast på L300 Go-lårmanchetten.
- 2 Placering på quadriceps (forsiden af låret): Sæt dig ned, og anbring L300 Go-lårmanchetten på låret, så placeringsindikatoren sidder tre fingerbredder fra knæet.
- 3 Sørg for at placere L300 Go-lårmanchetten, som anvist af klinikerens. Se figur 3.
- 4 Placering på hasemusklene (bagsiden af låret): Du skal enten sidde ned eller stå op, mens du anbringer L300 Go-lårmanchetten mindst 4 fingerbredder over bagsiden af knæet, lige under sædefolden. Se figur 4.

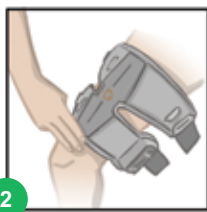

Betjening af L300 Go-systemet



- 1 Tryk på tænd-/slukknappen  for at tænde for EPG'en.
- 2 Vælg enten gang- eller træningstilstand:
 - Du vælger gangtilstand ved at trykke på tilstandsknappen  et kort øjeblik.
 - Du vælger træningstilstand ved at holde tilstandsknappen  nede i 3 sekunder. EPG'en bekræfter den nye tilstand med lydfeedback og taktil feedback. Du afslutter træningstilstand ved at holde tilstandsknappen  nede i 3 sekunder.
- 3 Om nødvendigt kan du justere stimulationsintensiteten ved at trykke på plusknappen  eller minusknappen .

Se brugervejledningen for at få en komplet liste over alle kontraindikationer, advarsler, bivirkninger, forholdsregler og vedligeholdelsesinstrukser.

L300 Go®, Bioness, Bioness-logoet® og LiveOn® er registrerede varemærker tilhørende Bioness Inc. i USA eller andre lande. | www.bioness.com

 **bioness**®
A Bioventus Rehab Company

Opladning af batterier

Slut systemopladersættet til EPG'en, og slut det til en stikkontakt.



	EPG-statusindikatorbjælken blinker rødt, samtidig med at batteriindikatorlyset blinker gult	Lavt EPG-batteriniveau
	Blinker gult	Lavt batteriniveau
	Blinker grønt	Oplader
	Lyser grønt	Fuldt opladet

Visninger på EPG



	Blinker grønt	Systemet er tændt
	Blinker grønt	Stimulationen er slået fra
	Blinker gult	Stimulationen er slået til
	Blinker rødt med lydalarm	Aktiv fejl
	Lyser rødt	EPG-fejl

Visninger på kontrolenheden*



	Lyser	Systemet er tændt
	Stimulationsbølgen er synlig	Systemet er i gang-/træningstilstand, stimulation er aktiveret men slået fra
	Stimulationsbølgen blinker	Systemet er i gang-/træningstilstand, stimulation er aktiveret og slået til
	Displayet viser 0-9	Intensitetsniveau
	Displayet viser gangikonet	Gangtilstand er aktiveret
	Displayet viser træningsikonet	Træningstilstand er aktiveret
	Displayet viser lydikonet	Lyden er slået til

*Valgfri komponent

Visninger af systemfejl

E 14 	Fejl i elektrodekontakt. Kontrollér, at elektroderne er knappet på, og at EPG'en sidder korrekt i holderen. Fjern fejlarmlarmen ved at trykke på eller på EPG'en.		
	Batteriindikatoren på EPG'en viser lavt niveau. Oplad systemet.		EPG-fejl. Hold knappen nede i 30 sekunder, og tænd så, eller ring til Teknisk Support.



Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355
Telefon: 800.211.9136
E-mail: info@bioness.com
Websted: www.bioness.com

