


Parring af komponenter

VIGTIGT! Systemkomponenterne skal parres, før de parres med den kliniske applikation

- 1 Lårmanchet med underbensmanchet.
Aktivering af EPG'ens parringstilstand: Tryk samtidigt på plus- og minusknappen på hver EPG. EPG-statusindikator-lyset vil blinke grønt, gult og rødt.
- 2 Om nødvendigt skal fodsensoren parres med underbensmanchettens EPG. **Aktivering af fodsensorens parringstilstand:** Fodsensoren parres med en ny EPG ved at sætte et batteri (CR2032) i fodsensoren og trykke på tryksensoren. Et grønt lys vil blinke for at bekræfte, at parringstilstanden er aktiveret. Sæt underbens-EPG'en i parringstilstand.

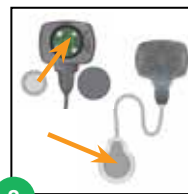

Parring af systemet med Bioness-programmeringsappen til klinikere

- 1 Log på Bioness-programmeringsappen til klinikere
- 2 Vælg  for at gå til skærmen Opret forbindelse. Sæt systemet i parringstilstand ved at trykke samtidigt på plus- og minusknappen på EPG'en. Vælg ikonet **Opret forbindelse**  over det ønskede ben. Efter parringen afslutter du skærmen Opret forbindelse ved at klikke på .
- 3 Vælg en patient, dvs. *Arbejd med eksisterende patient, Opret ny eller Vælg fra liste.*
Hvis du vælger fra patientlisten, skal du trykke på ikonet **Overfør**  eller dobbeltklikke på det valgte navn.



Tilpasning af L300-systemet

- 1 Monter det personlige indlæg.
- 2 Træk det personlige removertræk over remmen på manchetten.
- 3 Tør stimulationsområdet af med en blød, fugtig klud. Stræk derefter underbenet lidt.
- 4 Når du har sat elektroden/elektroderne fast på L300-manchetten, skal du anbringe manchetten på benet ved hjælp af patella-placeringsindikatoren på manchetten, fastgøre remmen og justere spændingen.
- 5 Programmér stimulationsindstillingerne for at opnå det ønskede respons.



Se brugervejledningen for at få en komplet liste over alle kontraindikationer, advarsler, bivirkninger, forholdsregler og vedligeholdelsesinstrukser.

L300 Go®, Bioness, Bioness-logoet® og LiveOn® er registrerede varemærker tilhørende Bioness Inc. i USA eller andre lande. | www.bioness.com

Tilpasning af L300 Go til låret alene

- 1 Fugt lårtektstilelektroderne, og knap dem på manchetten.
- 2 Tør stimulationsområdet af med en blød, fugtig klud. Anbring manchetten på låret mindst tre fingerbredder proksimalt for fossa poplitea (hasebrug) eller patella (quadricepsbrug).
- 3 Sørg for, at manchetten sidder midt på låret. Stram remmene.
- 4 Programmér stimulationsindstillingerne, mens patienten sidder ned, for at opnå det ønskede respons.
- 5 Juster om nødvendigt stimulationsindstillingerne, mens patienten står op.



Programmering af L300 Go-systemet

- 1  Programmér stimulationsindstillingerne. Vælg den ønskede EPG på dashboardet **Stimulationskontrol**. Vælg elektrodetype (på billedet er skærmen for styringselektroder vist). Mens patienten sidder ned, skal du trykke på **testknappen**  for at aktivere stimulationen på den valgte EPG. Juster indstillingerne for at opnå det ønskede respons. Tryk på **testknappen**  for at stoppe stimulationen. Gentag dette trin for alle tilsluttede EPG'er.
- 2  Programmér gangindstillingerne. Tryk på ikonet for skærmen **Gang**. Tryk på ikonet **Stimulationsbølge**  for at aktivere gangtilstand. Observer patienten i gang, og juster indstillingerne efter behov. Tryk på ikonet **Stimulationsbølge**  for at stoppe stimulationen.
- 3  Programmering af træningsindstillinger. Tryk på ikonet for skærmen **Træning** . Juster træningsindstillingerne, herunder udelukkelse af en specifik EPG om ønsket. Tryk på ikonet **Træning** for at aktivere stimulationen på alle parrede enheder, der er inkluderet i træningstilstanden. Tryk på ikonet **Træning**  for at stoppe stimulationen.
- 4 Når den enkelte session er slut, afbryder du forbindelsen til systemet ved at gå til skærmen **Opret forbindelse**  og trykke på ikonet **Afbryd forbindelse** . Afslut den kliniske applikation

Bemærk! Tryk på ikonet Manuel stimulation  og hold det nede for at aktivere stimulationen på alle parrede og aktive EPG'er, så længe der trykkes på knappen.



Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355
Telefon: 800.211.9136
E-mail: info@bioness.com
Websted: www.bioness.com



bioness[®]
A Bioventus Rehab Company

612-00881-001 Rev. E 12/2022