


Valtuutetun terveydenhuollon ammattilaisen pikaopas

L300 Go 

Komponenttien yhdistäminen

TÄRKEÄÄ: yhdistä järjestelmän komponentit, ennen kuin muodostat yhteyden Clinician-sovellukseen.

- 1 Reisimansetti ja alempi mansetti.
EPG-yhdistämistilan aktivointi: paina kummankin EPG:n plus- ja miinuspainiketta samanaikaisesti. EPG:n tilan merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä, keltaisena, punaisena.
- 2 Yhdistä tarvittaessa jalka-anturi ja alemman mansetin EPG.
Jalka-anturin yhdistämistilan aktivointi: yhdistä jalka-anturi uuteen EPG:hen asettamalla paristo (CR2032) jalka-anturiin ja painamalla paineanturia. Vihreä valo alkaa vilkkua ja vahvistaa yhdistämistilan aktiivisuuden. Aseta alempi EPG yhdistämistilaan.

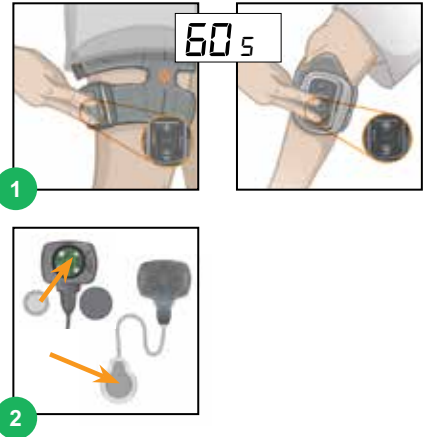

Bionessin valtuutetun terveydenhuollon ammattilaisen ohjelmoijasovelluksen yhdistämisen järjestelmään

- 1 Kirjaudu sisään Bionessin valtuutetun terveydenhuollon ammattilaisen ohjelmoijasovellukseen
- 2 Avaa yhdistämisnäyttö valitsemalla . Aseta järjestelmä yhdistämistilaan painamalla samanaikaisesti EPG:n plus- ja miinuspainiketta. Valitse haluamasi jalan yläpuolella oleva  -yhdistämiskuvake. Kun yhteys on muodostettu, poistu näytöstä valitsemalla .
- 3 Valitse potilas *eli Käsittele nykyistä potilasta, Luo uusi tai Valitse luettelosta*.
Jos valitset potilaan potilasluettelosta, paina latauskuvaketta  tai kaksoisnapsauta valittua nimeä.



L300 Go -järjestelmän asettaminen

- 1 Kiinnitä henkilökohtainen paneeli.
- 2 Liu'uta henkilökohtainen hihnan suojus mansetin hihnan päälle.
- 3 Pyyhi stimulaatioaluetta kostealla, pehmeällä liinalla. Ojenna sitten jalkaa hieman.
- 4 Kun elektrodi(t) on kiinnitetty L300 -mansettiin, aseta mansetti jalkaan mansetin polvilumpiopaikantimen avulla, kiinnitä hihna ja säädä kireys.
- 5 Ohjelmoi stimulaatioasetukset haluamasi vasteen saavuttamiseksi.




Täydellinen luettelo kaikista vasta-aiheista, varoituksista, haittavaikutuksista ja hoito-ohjeista on käyttöohjeessa.

L300®, Bioness, Bioness Logo® ja LiveOn® ovat Bioness Inc:n Yhdysvalloissa tai muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. | www.bioness.com

L300 Go Thigh Stand-Alone -järjestelmän asettaminen

- 1 Kastele kankaiset reiden elektrodit ja napsauta ne mansettiin.
- 2 Pyyhi stimulaatioaluetta kostealla, pehmeällä liinalla. Aseta mansetti reiteen vähintään kolmen sormenleveyden etäisyydelle polvitaippeesta (kiinnitys takareiteen) tai polvilumpiosta (kiinnitys etureiteen).
- 3 Keskitä mansetti reiden keskelle. Kiinnitä hihnat.
- 4 Ohjelmoi stimulaatioasetukset potilaan istuessa toivotun vasteen saavuttamiseksi.
- 5 Säädä tarvittaessa stimulaatioasetuksia potilaan seisoessa.

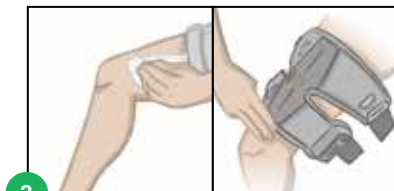

L300 Go -järjestelmän ohjelmointi

- 1  Ohjelmoi stimulaatioasetukset. Valitse haluamasi EPG stimulaation hallintasivulla. Valitse elektrodityyppi (kuvassa näkyy ohjauselektroдинäyttö). Käynnistä valitun EPG:n stimulaatio potilaan istuessa valitsemalla  **Testi**. Säädä asetuksia haluamasi vasteen saavuttamiseksi. Lopeta stimulaatio valitsemalla  **Testi**. Toista vaihe jokaiselle yhdistetylle EPG:lle.
- 2  Ohjelmoi kävelyasetukset. Paina kävelynäytön kuvaketta. Ota kävelytila käyttöön painamalla **Stim-aaltokuvaketta** . Tarkkaile potilasta kävelyn aikana ja säädä asetuksia tarpeen mukaan. Lopeta stimulaatio painamalla **Stim-aaltokuvaketta** .
- 3  Ohjelmoi harjoitusasetukset. Paina harjoitusnäytön kuvaketta . Säädä harjoitusasetuksia. Voit myös jättää tietyn EPG:n pois. Ota stimulaatio käyttöön kaikissa harjoitustilaan kuuluvissa yhdistetyissä laitteissa valitsemalla harjoituskuvake. Lopeta stimulaatio painamalla **harjoituskuvaketta** .
- 4 Poista kunkin istunnon päätteeksi järjestelmän yhdistäminen siirtymällä yhdistämisnäyttöön  ja valitsemalla yhteyden katkaisukuvakkeen . Poistu valtuutetun terveydenhuollon ammattilaisen sovelluksesta.

Huomautus: pidä manuaalisen stimulaation kuvaketta  painettuna, jos haluat aktivoida kaikkien yhdistettyjen ja aktiivisten EPG-laitteiden stimulaation, kun painiketta painetaan.



Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355 Yhdysvallat
Puhelin: 800.211.9136
Sähköposti: info@bioness.com
Verkkosivusto: www.bioness.com



bioness[®]
A Bioventus Rehab Company