



Komponentide sidumine

TÄHTIS! Siduge süsteemi komponendid enne arstirakendusse sisselogimist

- 1 Siduge reiemansett sääremansetiga.
EPG sidumisrežiimi aktiveerimine: vajutage kummalgi EPG-l korraka pluss- ja miinusnuppu. EPG oleku näidikutuli vilgub vaheldumisi roheliselt, kollaselt ja punaselt.
- 2 Vajaduse korral siduge jalalabaandur sääremanseti EPG-ga.
Jalalabaanduri sidumisrežiimi aktiveerimine: jalalabaanduri sidumiseks uue EPG-ga sisestage patarei (CR2032) jalalabaandurisse ja vajutage surveandurit. Roheline tuli hakkab vilkuma, et anda märku sidumisrežiimi aktiveerimisest. Seadke sääre EPG sidumisrežiimi.

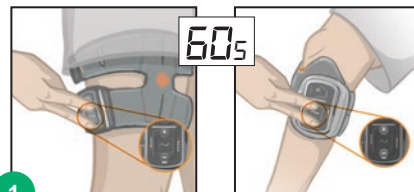

1

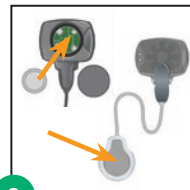

2

Süsteemi sidumine rakendusega Bioness Clinician Programmer

- 1 Logige rakendusse Bioness Clinician Programmer sisse.
- 2 Valige ikoon , et avada sidumiskuva. Seadke süsteem sidumisrežiimi, vajutades EPG-l korraka pluss- ja miinusnuppu. Valige soovitud jala kohal  sidumisikoon. Kui süsteem on seotud, väljuge sidumiskuvast, klõpsates ikooni .
- 3 Valige patsient, *st Work with Existing patient (Tööta olemasoleva patsiendiga), Create New (Loo uus) või Choose from List (Vali loendist).*
Kui valite patsiendi loendist, vajutage  üleslaadimise ikooni või topeltklõpsake valitud nime.



1




2




3

Süsteemi L300 Go paigaldamine

- 1 Kinnitage personaalne paneel.
- 2 Libistage personaalne rihmakate mansetirihmale.
- 3 Pühkige stimulatsiooniala pehme niiske lapiga. Seejärel sirutage jalg kergelt välja.
- 4 Kui elektrood(id) on kinnitatud mansetile L300, asetage mansett säärele, kasutades manseti kedralokaatorit, kinnitage rihm ja reguleerige pinget.
- 5 Programmeerige stimulatsioonisätteid, et saavutada soovitud vastus.

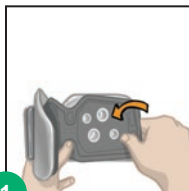


1

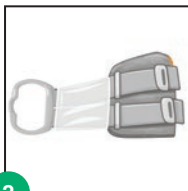

2



3

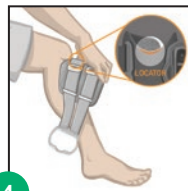

4



5


Rx Only (ainult USA-s)

Vastunäidustuste, hoiatuste, kõrvaltoimete, ettevaatusabinõude ja hooldusjuhiste täieliku loendi leiata kasutusjuhendist.

L300 Go®, Bioness, Bioness Logo® ja LiveOn® on ettevõtte Bioness Inc. kaubamärgid Ameerika Ühendriikides või muudes riikides. | www.bioness.com

Eraldiseisva reiemanseti L300 Go paigaldamine

- 1 Niisutage reie kangaselektroodid ja ühendage mansetiga.
- 2 Pühkige stimulatsiooniala pehme niiske lapiga. Asetage mansett reiele vähemalt kolme sõrmelaiuse võrra põlveõndlast (põlvekõõlusel rakendamine) või põlvekedrast (nelipealihasel rakendamine) proksimaalselt.
- 3 Seadke mansett reie keskjoonele. Kinnitage rihmad.
- 4 Programmeerige stimulatsioonisätteid, kui patsient istub, et saavutada soovitud vastus.
- 5 Vajaduse korral reguleerige stimulatsioonisätteid, kui patsient seisab.

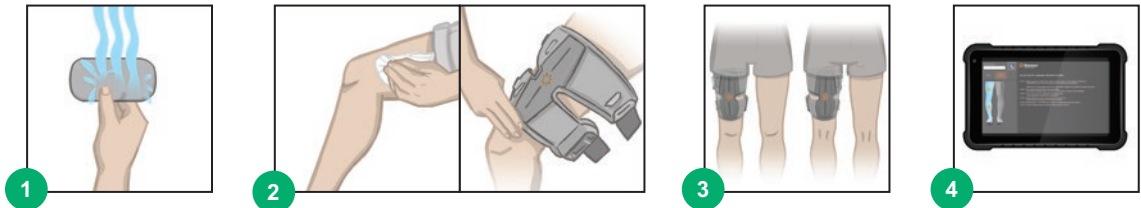

Süsteemi L300 Go programmeerimine

- 1 Programmeerige stimulatsioonisätteid. Valige kuval Stim Control Dashboard (Stimulatsiooni juhtimise töölaud) soovitud EPG. Valige elektroodi tüüp (pildil on näidatud kuva Steering Electrode (Suunav elektrood)). Laske patsiendil istuda ja vajutage **testimisikooni**, et lülitada valitud EPG-i stimulatsioon sisse. Reguleerige sätteid, et saavutada soovitud vastus. Stimulatsiooni lõpetamiseks vajutage **testimisikooni**. Korraldage toimingut kõigi ühendatud EPG-de puhul.
- 2 Programmeerige kõndimissätteid. Vajutage kõndimiskuva ikooni. Vajutage **stimulatsioonilaine ikooni**, et lubada kõndimisrežiim. Jälgige patsiendi kõndimist ja reguleerige sätteid vajadust mööda. Stimulatsiooni lõpetamiseks vajutage **stimulatsioonilaine ikooni**.
- 3 Programmeerige treeningusätteid. Vajutage **treeningukuva ikooni**. Reguleerige treeningusätteid, sh välistades soovi korral konkreetse EPG. Vajutage **treeninguikooni**, et lülitada stimulatsioon kõigis treeningurežiimis kasutatavates seotud seadmetes sisse. Stimulatsiooni lõpetamiseks vajutage **treeninguikooni**.
- 4 Iga seansi lõppedes siduge süsteem lahti, avades ikooniga sidumiskuva ja vajutades **lahutamiskooni**. Väljuge arstirakendusest.

Märkus. Vajutage ja hoidke all käsitsi stimulatsiooni ikooni , et aktiveerida stimulatsioon kõigis seotud ja aktiivsetes EPG-des, kuni nupp on alla vajutatud.



Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355
Telefon: (800) 211-9136
E-post: info@bioness.com
Veebisait: www.bioness.com



bioness®

A Bioventus Rehab Company

612-01439-001 Rev. A

05/2025